


HOW TO USE 【トリートメント方法】

- ◆ クレンジング・洗顔などを行い、化粧やお肌の汚れを取り除いてください。
- ◆ 金属類(時計・アクセサリー類)、眼鏡・コンタクトレンズを外してください。
- ◆ 半顔約25ショット、全顔約50ショットを目安にご使用ください。
- ◆ トリートメント終了後はしっかりと保湿(化粧水・美容液・クリームなど)してください。
- ◆ 過度なトリートメントは肌への負担となります。トリートメント方法・ショット数をお守りください。
- ◆ トリートメント終了後は、水を含ませた柔らかい布やティッシュで、本体とカートリッジの汚れをふき取ってください。
- ◆ ご使用時以外は、専用箱で保管してください。

トリートメント手順


※ 必ずカートリッジの面とお肌を密着させてご使用ください。

1 頬

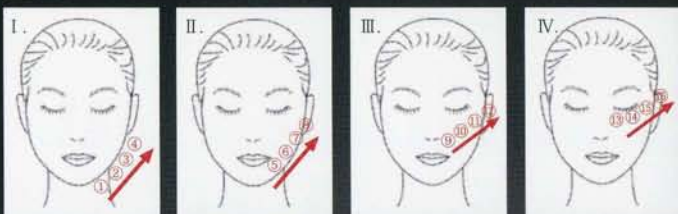


- I. アゴ先からフェイスラインに沿って。約4ショット。
- II. 口角から耳へ。約4ショット。
- III. 小鼻の横からもみあげ辺りまで。約4ショット。
- IV. 目の下を通りこめかみへ。約4ショット。

2 額

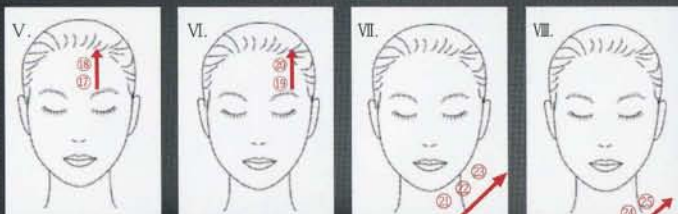


- V. 眉頭の上から頭頂部に向かって生え際まで約2ショット。
- VI. 眉山の上から頭頂部に向かって生え際まで約2ショット。

3 首

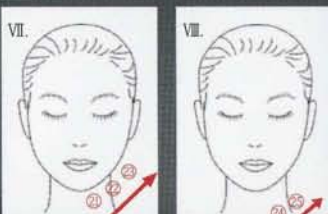

- VII. アゴ下から耳下の部分へ。約3ショット。
- VIII. その下を同じ方向に向かって。約2ショット。

禁止部位

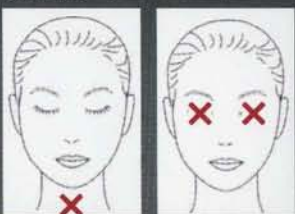

喉仏と眼球(上瞼)には使用しないでください。また、お顔以外のご使用はお控えください。

ARTEMIS

MEGA SONIC,
SUPER FOCUSED



〈発売元〉

株式会社 ARTISTIC&CO.INTERNATIONAL
〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-27-13 1F
TEL.06-6927-7776 FAX.06-6927-7772
<http://www.artistic-inc.co.jp>

今ある美、その先の美。



ARTEMIS

MEGA SONIC
SUPER FOCUSED

エステメニューをご自身で——
待望のホームケアマシンが遂に誕生。
今ある美、その先の美を目指し続ける
あなたへ贈る『ARTEMIS』
ワンランク上のお手入れを贅沢にご実感ください。

MEGA SONIC SUPER FOCUSED

ポイントを定めた超音波によって、新しいフェイシャルケアが実現。
肌へのハリ感・引き締めを最大限に導きます。
トリートメント後には、確かな実感。未来への期待。

こんな方へお薦め

- フェイスラインやたるみが気になる
- ハリ・ツヤ感がほしい
- 今のケアに満足していない
- 額・目元のしわが気になる



※イメージ図

◇本体・付属品



本体



カートリッジケース



ハンドピース



ACアダプタ



電源コード

【仕様】

製品名	ARTEMIS(アルテミス)
電源定格	AC100-240V 50/60Hz 入力電圧 DC24V
定格周波数	60Hz
消費電力	最大20W
外形最大	362mm(W) × 265mm(D) × 133mm(H)
重量	約3kg
本体価格	225,000円(税抜)

株式会社ARTISTIC&CO.INTERNATIONAL

顧問医師 **住吉周子** 医師

医療法人瑞和会 ラップルズメディカル大阪クリニック
皮膚科部長 アンチエイジング美容協会 名誉顧問

- 日本内科学会会員 ●日本抗加齢美容医療学会会員
- 日本美容皮膚学会会員 ●日本医薬研究会会員

